

Information Générale sur votre appareil

Compagnie : _____


Modèle : _____

Batterie # _____

Vos nouveaux appareils auditifs nécessitent un minimum de maintenance. Afin d'en faire l'utilisation convenablement, vous trouverez ci-dessous quelques points importants :

1. Parties sur vos aides auditives :

- L'appareil **bleu** va du côté **gauche** et l'appareil **rouge**, du côté **droit**.
- Vos aides auditives ne devraient pas vous faire mal à l'oreille ni sortir seules de l'oreille.

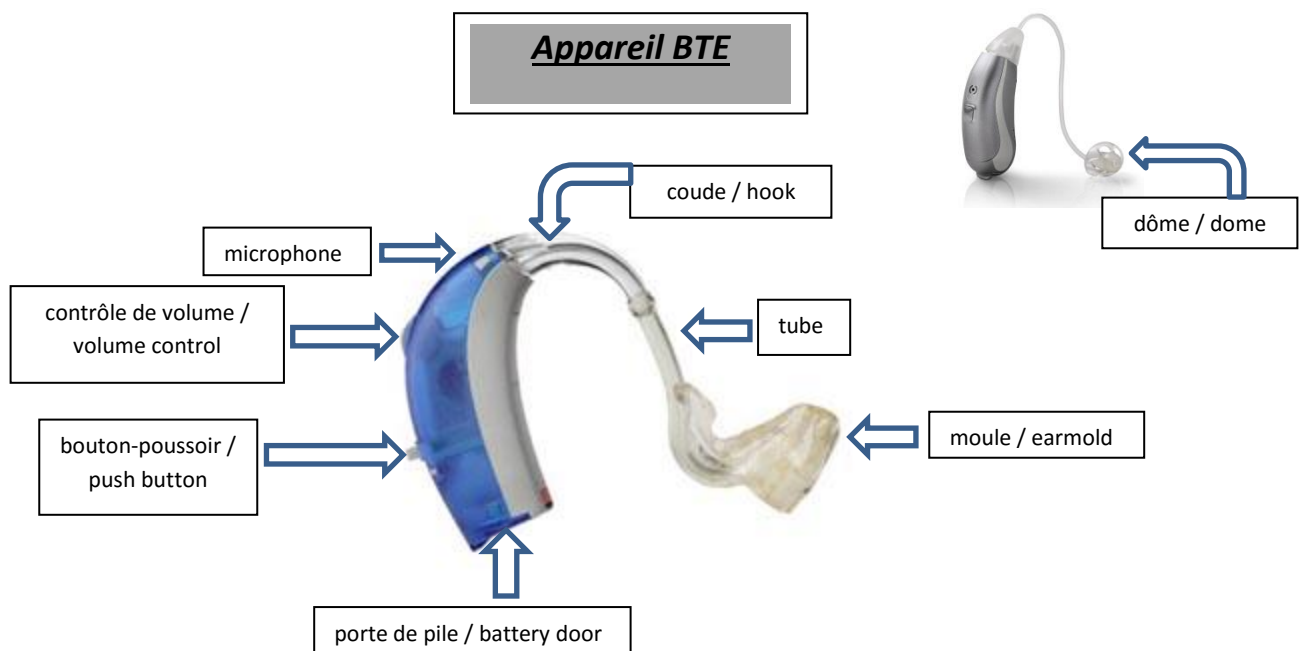

2. Boîte de rangement



- Si vous rangez vos appareils auditifs dans la boîte, assurez-vous que la porte de batterie demeure ouverte. Vous préserverez ainsi la vie de vos batteries.
- Assurez-vous que vos aides auditives soient bien rangées si vous avez de jeunes enfants ou des animaux. Ces derniers aiment beaucoup la senteur qui se dégage des appareils et pourraient les manger. Il en va de même pour les piles (voir la section piles pour plus de détails).
- Vos appareils devraient demeurer au sec. Vous pouvez aussi utiliser un déshumidificateur pour ranger vos appareils le soir (voir la section sur l'humidité pour plus de détails).

3. Pour nettoyer votre appareil auditif, différents outils sont mis à votre disposition. Voici comment procéder au nettoyage :

- Nettoyer les appareils de façon régulière (vous faire une routine vous aidera).



- Utiliser la lingette à lunette

- Utiliser du vaporisateur nettoyant. Il est important de ne pas vaporiser directement sur l'appareil, mais plutôt sur un papier mouchoir. Ce dernier ne devrait pas être trop imbibé de produit nettoyant. Dans le cas de votre appareil BTE, le nettoyant devrait être utilisé pour nettoyer le moule/dôme seulement. Une autre façon de nettoyer vos moules/dômes: vous pouvez enlever le tube et le moule/dôme et les laver sous l'eau. Si vous procédez ainsi, vous devrez attendre qu'ils soient secs avant de les remettre sur l'appareil.



- Utiliser la poire à air



- Utiliser les brosses




- Utiliser l'aimant (pour vous aider à enlever ou mettre les piles plus facilement)



- Utiliser la brosse à évent ou bâton-tige



- Utiliser la tige filament à pêche. Elle doit être utilisée avec un appareil BTE qui a un petit tube et celui-ci doit être détaché de l'appareil pour le nettoyer.

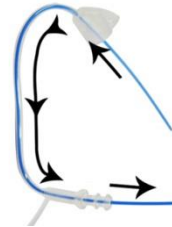

- Utiliser le crochet pour enlever la cire d'oreille

