

### Information Générale sur votre appareil

Compagnie : \_\_\_\_\_


Modèle : \_\_\_\_\_

Batterie # \_\_\_\_\_

Vos nouveaux appareils auditifs nécessitent un minimum de maintenance. Afin d'en faire l'utilisation convenablement, vous trouverez ci-dessous quelques points importants :

#### **1. Parties sur vos aides auditives :**

- L'appareil **bleu** va du côté **gauche** et l'appareil **rouge**, du côté **droit**.
- Vos aides auditives ne devraient pas vous faire mal à l'oreille ni sortir seules de l'oreille.

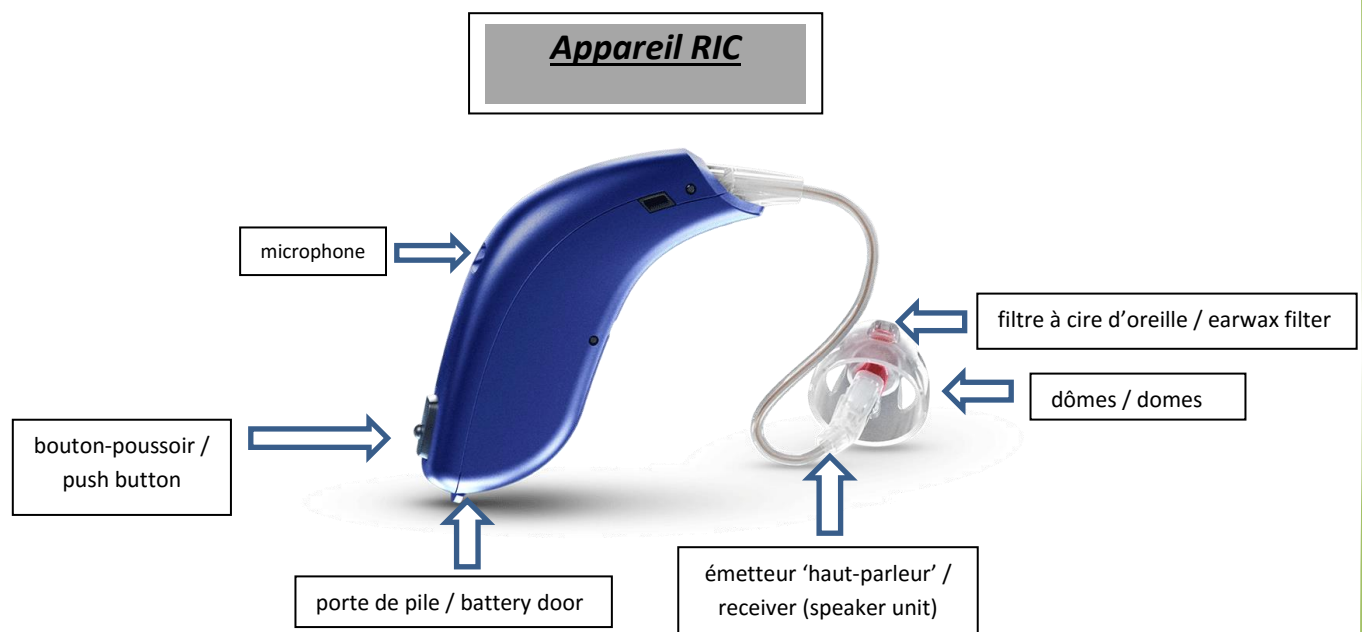

## 2. Boîte de rangement



- Si vous rangez vos appareils auditifs dans la boîte, assurez-vous que la porte de batterie demeure ouverte. Vous préserverez ainsi la vie de vos batteries.
- Assurez-vous que vos aides auditives soient bien rangées si vous avez de jeunes enfants ou des animaux. Ces derniers aiment beaucoup la senteur qui se dégage des appareils et pourraient les manger. Il en va de même pour les piles (voir la section piles pour plus de détails).
- Vos appareils devraient demeurer au sec. Vous pouvez aussi utiliser un déshumidificateur pour ranger vos appareils le soir (voir la section sur l'humidité pour plus de détails).

## 3. Pour nettoyer votre appareil auditif, différents outils sont mis à votre disposition. Voici comment procéder au nettoyage :


- Nettoyer les appareils de façon régulière (vous faire une routine vous aidera).



- Utiliser la lingette à lunette
- Utiliser du vaporisateur nettoyant. Il est important de ne pas vaporiser directement sur l'appareil, mais plutôt sur un papier mouchoir. Ce dernier ne devrait pas être trop imbibé de produit nettoyant. Dans le cas de votre appareil RIC, le nettoyant devrait être utilisé pour nettoyer le dôme seulement. Soyez prudent avec les extrémités, celles-ci sont sensibles à l'humidité. Une autre façon de nettoyer vos dômes: vous pouvez les enlever et les laver sous l'eau. Vous devrez alors attendre qu'ils soient secs avant de les remettre sur le haut-parleur. S'ils sont endommagés, les dômes peuvent être changés (demander à votre audiologiste pour en avoir d'autres).



- Utiliser les brosses

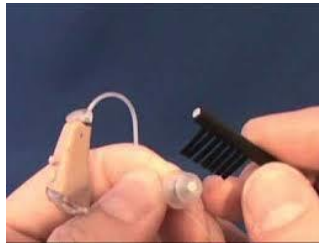

- Utiliser l'aimant (pour vous aider à enlever ou mettre les piles)



- Changer les filtres cérumen (waxguard) – À changer lorsque vous n'entendez plus bien ou qu'ils semblent bouchés. Les intervalles peuvent différer d'une personne à l'autre ainsi que d'une fois à l'autre (aux années vs aux semaines). Si vous n'en avez plus, demandez à votre audiologiste.



- Utiliser le crochet pour enlever la cire d'oreille

